

New Super 2 RT-PCR Kit

利用RTase和HotStart Taq
對Total RNA或mRNA
進行RT產生cDNA 緊接著做PCR
產生DNA 並可直接做TA cloning

1 + 1 可能大於 2 嗎?!

體驗 Super 2 的魅力

產品特色

歡迎索取 sample 試用

- 減少操作時間，降低 RT-PCR 汙染機率。
- One Step reaction RT-PCR 一步完成。
- 只需加入 Primer 及 template 即可進行 RT-PCR 反應。
- 再現性高，品質穩定。
- 含HotStart Taq，減少非特異性PCR產物
- Two Tube 型式，保存更穩定，-20C 保存一年以上。

Cat # : RP200
Size : 50 Reactions

即日起至2010/7/31
限開發票及一次取貨

實測數據

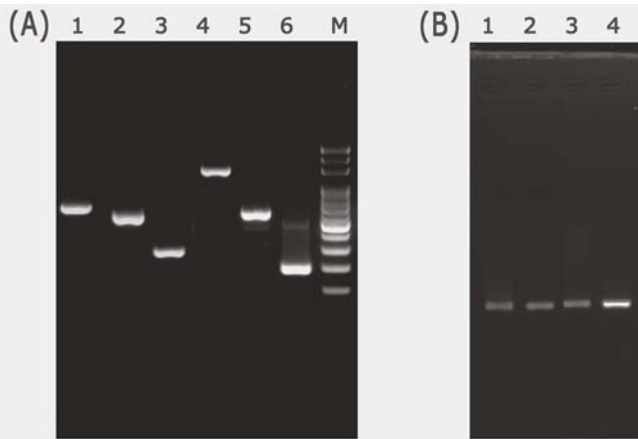


Fig. A. Three different species amplified by Super2 RT-PCR.
Fig. B. Comparison of the result with other competitors with Super2 RT-PCR

(A)
Lane1: Rice 600 bp
Lane2: Human β -actin 564 bp
Lane3: Human β -actin 285 bp
Lane4: Zebrafish β -actin 1.45 kb
Lane5: Zebrafish GAPDH 571bp
Lane6: Zebrafish GAPDH 199 bp

(B)
Lane1: C1 company
Lane2: C2 company
Lane3: C3 company
Lane4: Super2 RT-PCR

適用範圍廣

Super 2 RT-PCR
測試不同物種和長度

效果最好

Super 2 RT-PCR
和其他市售品牌比較

特惠每組
NT\$3,800

DM990416001



波仕特生物科技股份有限公司
Web Site: www.bio-protech.com.tw

服務專線 北部 0800-231-530 竹苗 0800-500-110 中部 0800-555-650 南部 0800-268-266

台北 02-26557677
花蓮 03-8463953

台中 04-22624883
新竹 03-5753468

高雄 07-3425707
竹南 037-680138